


# GEBRUIKERSHANDLEIDING ZELFTEST ROCHE

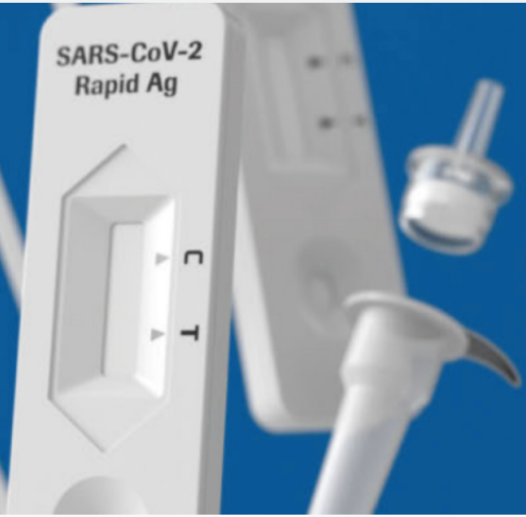

SARS-CoV-2  
Rapid Ag

De zelftest van Roche blinkt uit in eenvoud: **vier stappen** volstaan om binnen een tijdspanne **van 15 à 30 minuten tot een betrouwbaar resultaat te komen**. We zetten ze even voor u op een rij:

## **Stap 1: neusuitstrijkje nemen in beide neusgaten**

Het wattenstaafje dient ongeveer 2 cm in een neusgat gestoken te worden (zonder dat daarbij druk uitgeoefend wordt) met het "watje" aan de voorzijde. Vervolgens moet het 4 keer – in totaal een 15-tal seconden – tegen de binnenkant van de neus gedraaid worden en uit de neus verwijderd worden. Deze stappen dienen – met hetzelfde wattenstaafje! – in het andere neusgat herhaald te worden.

## **Stap 2: voorbereiding van het staal**

Nadat de staalname is uitgevoerd, dient het wattenstaafje in een extractiebufferbuisje geplaatst te worden, en 10 keer heen en weer gedraaid te worden terwijl de onderkant van het buisje aan beide kanten samengeknepen wordt. Ook bij de verwijdering van het staafje, dient de onderkant van het buisje samengeknepen te worden, zodat alle vloeistof eruit kan geperst worden.

## **Stap 3: uitvoering van de test aan de hand van druppels**

Nadat het buisje verticaal boven het ronde gemarkeerde veld van de teststrip gehouden wordt, dient dit veld precies 4 druppels op te vangen. Na 15 à 30 minuten kan het resultaat afgelezen worden.

## **Stap 4: de mogelijke resultaten**

Een test bevat twee lijnen: een controlelijn en een testlijn. Als beide lijnen zichtbaar zijn, is de test positief. Als enkel een controlelijn te zien is, is de patiënt negatief. In het geval de controlelijn niet zichtbaar is, moet het resultaat als ongeldig beschouwd worden, en dient de test opnieuw uitgevoerd te worden met een nieuwe testkit.