




Gebruiksaanwijzing Novolizer®

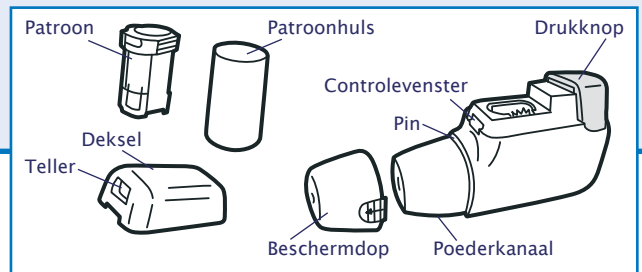


*Voorbereiding bij nieuwe Novolizer®, zie volgende pagina.

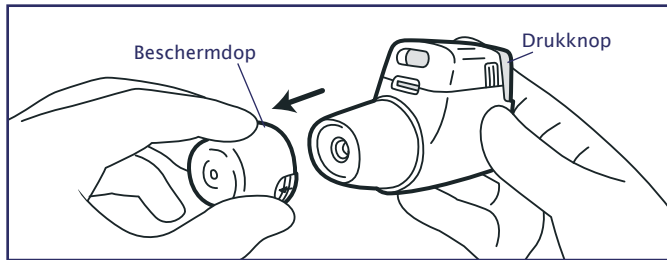


- Stap 1. Zorg dat uw mond leeg is.
Stap 2. Houd de Novolizer® met de drukknoop aan de bovenkant. Haal de beschermdop van het mondstuk.

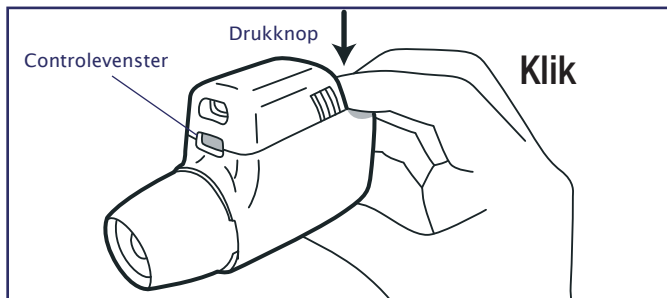


- Stap 3. Druk de knop aan de achterkant helemaal in. U hoort een dubbele klik. Laat daarna de knop los. Doe dit vlak voordat u inhaleert. De kleur van het controlevenster verandert van rood in groen.

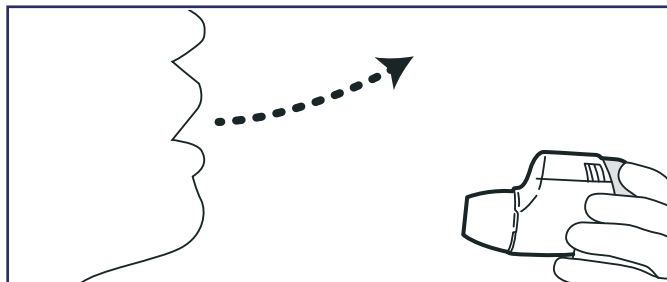


- Stap 4. Ga rechtop zitten of staan, houd uw hoofd iets achterover. Adem uit. Doe dit langzaam en volledig. Adem niet uit in de Novolizer®.

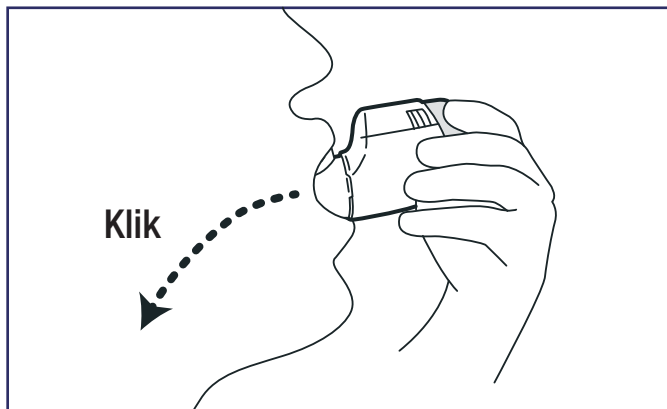

- Stap 5. Neem het mondstuk tussen uw tanden en sluit uw lippen eromheen.
Stap 6. Adem nu met een krachtige teug in, zo diep als u kunt. U ademt goed in als u binnen de eerste seconde een klik hoort. Blijf inademen na de klik.
Stap 7. Houd uw adem 10 seconden vast of zo lang als u kunt. Neem de Novolizer® uit uw mond. Adem rustig uit. Adem niet uit in de Novolizer®.

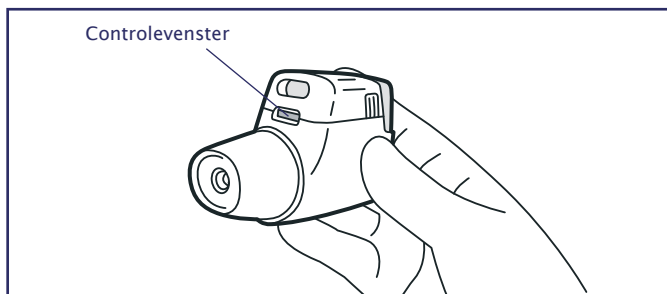


- Stap 8. Controleer of het controlevenster van groen in rood is veranderd. Heeft u geen klik gehoord of verandert de kleur niet in rood, herhaal dan stap 4 t/m 8.
Stap 9. Heeft uw arts meer dan 1 puffje per keer voorgeschreven, herhaal dan stap 3 t/m 8.

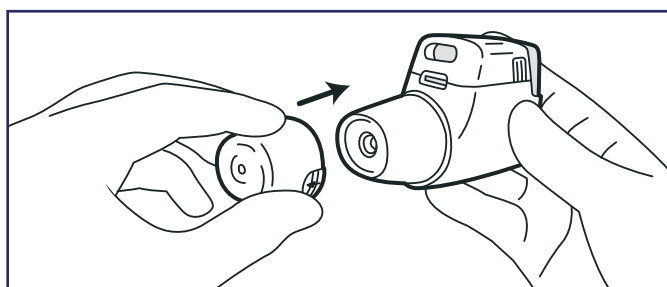


- Stap 10. Zet de beschermdop op het mondstuk.
Stap 11. Spoel uw mond en keel met water: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken.

Gebruiksaanwijzing Novolizer®

*Voorbereiding: de eerste keer een nieuwe Novolizer® gebruiken

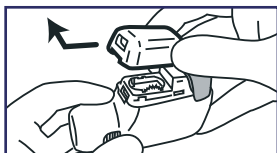

Stap A. Druk de geribbelde vlakken aan beide kanten van het deksel zachtjes in, schuif het deksel naar voren en til het op.

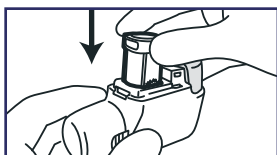


Stap B. Haal de beschermfolie van de patroonhuls en neem de nieuwe patroon uit de huls. Zet de patroon in de Novolizer® met de dosisteller naar het mondstuk gericht.




Stap C. Zet het deksel weer van bovenaf terug en duw het in de richting van de drukknop tot het op zijn plaats klikt.

Schoonmaken: Maak het mondstuk schoon met een droge tissue. Nooit afspoelen met water.


Bij vervangen van het patroon:

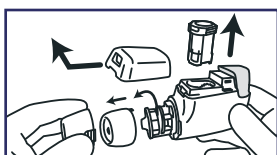


Stap D. haal het deksel van de Novolizer® af en haal de patroon eruit. Haal daarna de beschermdop eraf. Haal het mondstuk eraf door deze linksom te draaien.

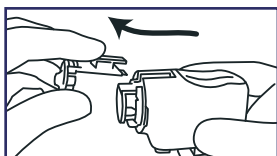

Stap E. Draai de Novolizer® nu ondersteboven. Pak het losse poederkanaal vast en schuif het naar voren en naar boven. Maak het mondstuk, het poederkanaal en de inhalator schoon met een zachte, droge, niet pluizende doek. Klop eventuele poederresten er zachtjes uit. Gebruik geen water of reinigingsmiddel.

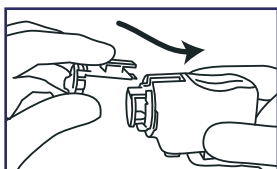

Stap F. Zet de Novolizer® na het schoonmaken in elkaar: maak het poederkanaal vast door het schuin in te steken. Draai de Novolizer® weer om.

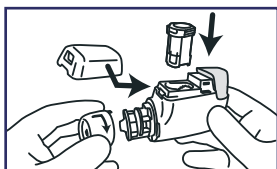

Stap G. Maak het mondstuk vast door het pinnetje in de groef te steken en naar rechts te draaien. Plaats het patroon in de Novolizer®. Zet de beschermdop terug.

Bewaaradvies: Bewaar de Novolizer® op kamertemperatuur (niet in de badkamer of keuken).

Blijf uw medicijnen gebruiken zoals uw arts heeft voorgeschreven. Doet u dat niet, dan worden uw longen minder gezond.

Heeft u vragen of problemen?
Ga naar uw huisarts, praktijkverpleegkundige/-ondersteuner, longarts, longverpleegkundige of apotheker.

Laat één keer per jaar controleren of u nog goed inhaleert.

Bekijk voor meer informatie het filmpje van de Novolizer® op www.inhalatorgebruik.nl.