

# Novolizer

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende techniek om longaandoeningen te behandelen. Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie. Volg zorgvuldig volgende aanbevelingen op om zo veel mogelijk geneesmiddel op de juiste plaats in de longen te krijgen.

## Klaarmaken voor eerste gebruik

- ① Neem het bovenste deksel van de Novolizer®. Dit doe je door lichtjes op de geribde oppervlakken aan beide kanten van het deksel te drukken en het deksel naar voor te duwen.



- ② Neem het nieuwe patroon uit zijn verpakking.




- ③ Breng het patroon in de Novolizer® met de dosis-aanduider naar het mondstuk gericht.



- ④ Plaats dan het deksel terug.



- 5 **Adem zo krachtig en zo diep mogelijk in.** Let erop niet langs de neus in te ademen. Ook nu zal je een klik horen tijdens het vrijkomen van de dosis. Blijf verder inademen.

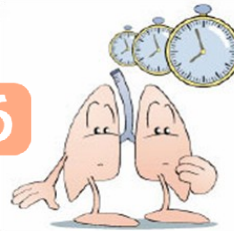

- 6 Haal de inhalator uit de mond. **Hou de adem 5 à 10 tellen in** en adem daarna rustig uit.

- 7 Kijk nog even na of de dosis correct is ingenomen. Dit merk je aan het controlevenster dat weer rood is. Kijk ook af en toe hoeveel puffs er nog over blijven. Dit zie je aan het tellertje boven het controlevenster.



## Inhalatie-instructies


- 1 **Verwijder de beschermdop** door lichtjes op de beide kanten van de kap te drukken en ze naar voren te schuiven.



- 2 Hou het apparaat horizontaal en **druk de doseerknop diep in.** Je hoort een luide klik en de kleur in het controlevenster wordt groen. Laat de drukknop terug los. Een dosis staat nu klaar om in te ademen.



- 3 **Adem volledig uit, weg van het toestel**  
*Zo vermijd je dat de binnenkant van het toestel vochtig wordt en dat je het poeder wegblaast.*

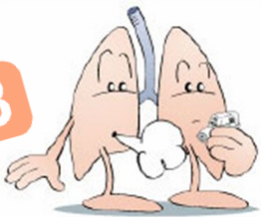

- 4 Als je volledig uitgeademd hebt, houd dan het hoofd rechtop en lichtjes achterover. Plaats het mondstuk tussen de tanden en omsluit het goed met de lippen.  
*Doordat de luchtwegen dan zo recht mogelijk zijn, vermindert de hoeveelheid geneesmiddel dat aan de keel blijft kleven.*



- 8 Indien je een tweede dosis moet nemen, wacht je één minuut voor een volgende inhalatie en herhaal je stappen 2 tot 7.

- 9 Plaats de beschermdop terug. *Zo adem je bij een volgend gebruik geen stof in.*



- 10 Indien je inhalator cortisone bevat, moet je de **mond spoelen na inhalatie.** Gorgel bij voorkeur tweemaal en spuw het spoelwater uit.  
*Zo blijft er geen medicatie in de mond achter. Dit voorkomt bijwerkingen zoals heesheid of een keel-infectie.*

**Bewaren en reinigen van de Novolizer®: zie volgende pagina.**




## Bewaren en reinigen

- Zorg ervoor dat de beschermdop steeds goed gesloten is.
- Bewaar het toestel op een droge, koele plaats.
- Telkens je een nieuw patroon in het toestel laadt, moet je eerst het aangekoekte poeder uit het toestel halen. Dit doe je door:

### **Verwijder de beschermdop en het mondstuk**

- ① Verwijder eerst de beschermdop.
- ② Pak vervolgens het mondstuk vast en draai het eventjes tegen de wijzers van de klok in (↑) tot het loslaat. Je kan nu het mondstuk verwijderen (←).

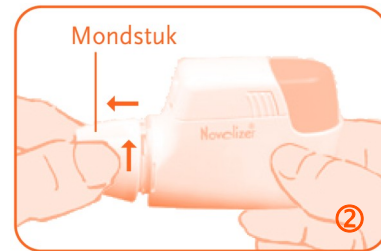



### **Reinigen**

- ③ Draai de Novolizer® nu ondersteboven. Pak de losse doseringsschuif vast en schuif hem naar voren (←) en naar boven (↑).
- ④ Eventueel achtergebleven poeder verwijder je door zachtjes te kloppen.
- ⑤ Maak het mondstuk, de doseringsschuif en de rest van het toestel schoon met een zachte en droge, niet-pluizende doek. Gebruik GEEN water of reinigingsmiddel.



### **Opnieuw bevestigen**

- ⑥ Bevestig de doseringsschuif door hem onder een hoek naar beneden te schuiven (↘) en hem terug op zijn plaats te drukken (↓).
- ⑦ Bevestig het mondstuk met de pin in de groef aan de linkerkant en draai het naar rechts tot het op zijn plaats klikt.

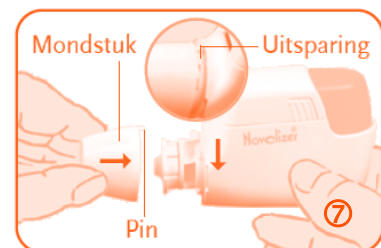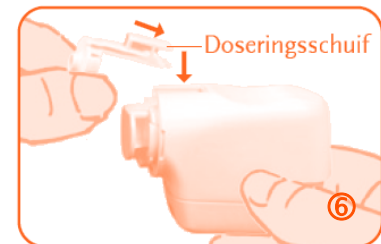

Stempel van de apotheek